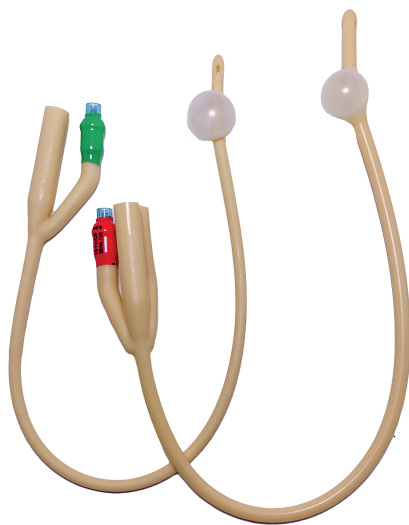




almed

DESCRIPCIÓN

El catéter de látex de Foley son tubos flexibles que se pasan a través de la uretra durante el cateterismo urinario hasta la vejiga para drenar la orina o para insertar líquidos en la vejiga.

CARACTERÍSTICAS

Material: Látex

Tipo: sonda vesical de 2 o 3 vías estéril.

Color: látex (beige)

Según el calibre: Los calibres deben seleccionarse según el sexo, la edad y características del paciente:

Adultos: 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr

Pediátricas: 8F, 10F

Femenina: 12Fr, 14Fr, 16Fr

Estilo de empaque:

Bolsa estéril por unidad.

Uso previsto: utilizados para drenar y coleccionar orina de la vejiga o para insertar líquidos dentro de ella. Usados en urología, medicina interna, obstetricia y ginecología

Esterilización: óxido de etileno

Diseño y especificaciones:

-2 vías para drenaje vesical.

-3 vías para drenaje e irrigación vesical.

-Válvula antirreflejo y de vaciado.

Condiciones de almacenamiento:

Humedad relativa máxima 70%, temperatura max 30c°

Vida útil del producto:

Duración de 5 años desde la fecha de fabricación, en las condiciones de bodegaje adecuadas.

INDICACIONES

- Antes de usarlo, inspeccione visualmente el catéter para detectar daños mecánicos y verifique que no se produzcan fugas
- Lubrique la punta y el eje del catéter con un lubricante a base de agua.
- Inserte con cuidado la punta del catéter en la vejiga
- Infle el globo con el volumen de líquido requerido
- Conecte el catéter a un dispositivo de drenaje de orina.
- Para retirar el catéter, desinfele el globo insertando una jeringa Luer en la válvula de inflado. Suelte el émbolo de la jeringa y deje que el globo se desinfele.

PRECAUCIONES

- El producto está diseñado para ser utilizado por médicos capacitados y se debe practicar una técnica aséptica.
- Este es un producto desechable para un solo uso, cualquier reesterilización o reutilización del producto puede resultar en un peligro para el paciente.
- No lo use si el paquete ha sido abierto o dañado.
- Este producto contiene látex y puede causar alergia

REGISTRO INVIMA 2022DM-0024871