

1.- Descripción corta: Ultra-Fine™ Jeringa 6mm 31G 1mL 100 pzas.

2.- Descripción larga: Jeringa de inyección de insulina Ultra-Fine™ 6mm x 31G x 1mL de capacidad con 3 bisels. Conteniendo 10 bolsas de polietileno con 10 jeringas cada una.

3.- Código interno: 324918.

Empaque Secundario



Contenido: Caja con 100 jeringas
 Largo (cm): 17.5
 Ancho (cm): 14
 Alto (cm): 8.3
 Peso Bruto (kg): 0.39
 EAN 13 | GTIN 13: 0383017491833



Empaque Primario



Contenido: 10 jeringas
 Largo (cm): 11
 Alto (cm): 18.5
 Código del polybag:
 0383017491819




Empaque Colectivo



Contenido: 5 cajas
 Contenido: 500 jeringas
 Camas por corrugado: 1
 Largo (cm): 43.5
 Ancho (cm): 18.5
 Alto (cm): 15
 Peso Bruto (kg): 2.2
 DUN 14 | GTIN 14:
 50383017491852



Información de tarima:

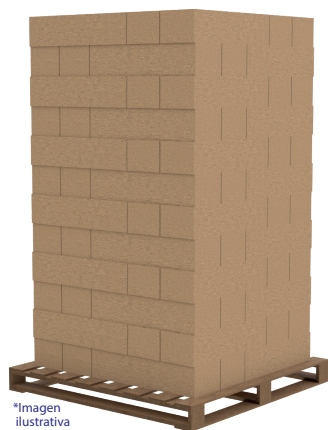

*Imagen ilustrativa

Cajas por cama:	14
Camas por pallet:	12
Cajas colectivas por pallet:	168
Número de agujas por pallet:	84,000
Altura del pallet sin tarima de madera (cm)	192
Altura del pallet con tarima de madera (cm)	205
Largo del Pallet (cm)	120
Ancho del Pallet (cm)	100
Peso por pallet sin tarima (kg)	233
Peso por pallet con tarima (kg)	250

4.- Información Adicional

Componentes del dispositivo	Material
Color de Cilindro	Claro
Material del Cilindro	Polipropileno
Lubricante del Cilindro	Silicón grado médico
Pabellón	Polipropileno
Adhesivo	Adhesivo de curado UV o epóxy
Embolo	Poliestireno
Pistón	Poliisoprenol – caucho SRB
Funda	Polietileno Virgen
Cánula	Acero inoxidable
Lubricante de la cánula	Silicón grado médico
Aguja	Integrada a la jeringa
Gauge de la aguja	31G
Largo de la aguja (pulgadas)	15/64"
Largo de la aguja (milímetros)	6mm
Ingeniería de la punta de la aguja	Tres biseles
Pared de la aguja	Delgada
Capacidad de la jeringa	1mL
Escala de la jeringa	2 en 2 UI Nítida e imborrable
Esterilidad	Producto esterilizado
Modo de esterilización	Radiación Gamma
Técnica de esterilización	Cobalto 60
Libre de látex	Sí

5.- Seguridad.

- Tapón blanco, protege al émbolo y garantiza la esterilidad.
- Tapón naranja: protege la aguja y garantiza la esterilidad

La esterilidad solo se garantiza siempre que los protectores de la aguja y el émbolo no hayan sido violados o dañados.

6.- Condiciones de almacenamiento

- Almacenamiento temperatura ambiente.
- Se apilan y envían en APL (palets americanos, 36" x 48") con un máximo de 8 capas de cargadores de altura (14 cargadores/capa)

7.- Vida útil: Ver lote y fecha de caducidad en empaque.

8.- Instrucciones de uso:

- Para exponer el émbolo, gire el tapón blanco rompiendo el sello de seguridad y retírelo.
- Para exponer la aguja, gire la tapa naranja, rompiendo el sello de seguridad. Retírelo de una sola vez y tenga cuidado para no causar ningún daño en la aguja.
- Para obtener la dosis correcta: Empuje el émbolo hacia la punta de la jeringa. Hale el émbolo hacia abajo lentamente, alineando la línea negra delgada hasta el número de unidades deseadas en la jeringa.
- Use la jeringa una sola vez. No es recomendable su reuso, para prevenirlo descarte la jeringa y la aguja después de la inyección.

9.- Precauciones y advertencias:

- A los pacientes que mezclan dos tipos de insulina se les recomienda:
 - No cambiar el orden de la mezcla que el médico haya prescrito.
 - No cambiar el modelo y marca de jeringa o aguja sin consultar primero a su médico.
 - Producto estéril, siempre y cuando los protectores de la aguja y el émbolo no hayan sido removidos.

Registro sanitario: INVIMA 2017DM-0001046-R1

Código GMDN (Global Medical Device Nomenclature): 38501

Clasificación de Riesgo: IIA

CONSULTE A SU MÉDICO

Ficha técnica 324918 Jeringa de Insulina Ultra-Fine™ Caja con 100 piezas.

embecta y su logotipo son marcas comerciales de embecta Corp. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2026 embecta Corp. Todos los derechos reservados.