



# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Septiembre 26 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Opaca Muslo Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 5222

## FOTOGRAFIA



## DETALLES

Mediana compresión 15-20mmHg.

## INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

## BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Pie con plantilla que permite la transpiración.
- Banda siliconado para ajuste perfecto.

## RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

## CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
  - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

## COMPOSICIÓN

Composición: 80% Poliamida 20% Elastano

## DATOS ESPECÍFICOS

Color: Beige y Negro  
Tallas: S, M, L y XL




# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Septiembre 26 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Opaca Muslo Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 5222

## SUJETADOR

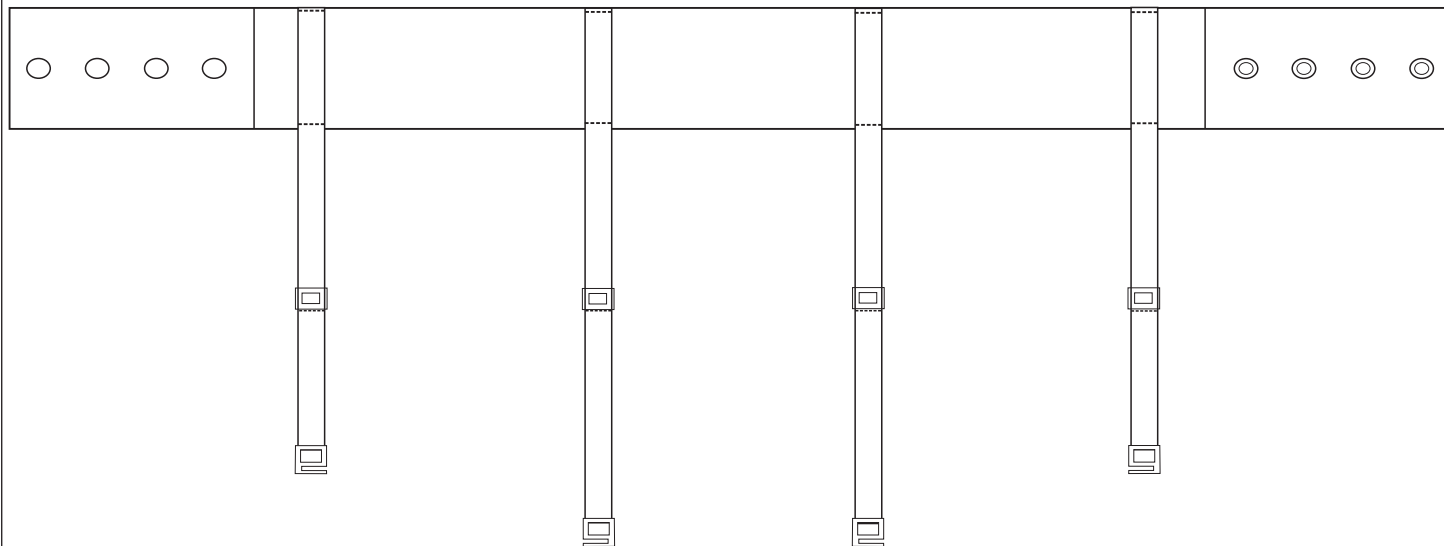

## CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda e insumos.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.
- Tener uniformidad en el pegue del elástico siliconado.

## RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

## CÓDIGOS

| Item      | Nombre       |               |            | Codigo EAN-13 |
|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 5222p0104 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | NEGRO TS   | 7707670408640 |
| 5222p0108 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | BEIGE T S  | 7707670408725 |
| 5222p0204 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | NEGRO TM   | 7707670400699 |
| 5222p0208 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | BEIGE T M  | 7707670407223 |
| 5222p0304 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | NEGRO TL   | 7707670401931 |
| 5222p0308 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | BEIGE T L  | 7707670405496 |
| 5222p0404 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | NEGRO TXL  | 7707670405748 |
| 5222p0408 | UNISEX OPACA | MUSLO MEDIANA | BEIGE T XL | 7707670401443 |



# FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Septiembre 26 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Opaca Muslo Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 5222

## MATERIAL EMPAQUE

**Medi Varic®**

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS


COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN  
Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstate y eleva las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Products SAS  
www.medivaric.com.co  
Línea Nacional de Atención: 011 4 30 30 30, Bogotá, D.C., Colombia  
R.S. INVIMA 2011DM-0007944

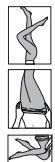

1. Retire el calcetín y levante el talón de la pierna. Levante el talón de la pierna y levante el talón de la pierna.

2. Coloque la media en la pierna y levante el talón de la pierna.

3. Levante la media y levante el talón de la pierna.

4. Levante la media y levante el talón de la pierna.

5. Levante la media y levante el talón de la pierna.

6. Levante la media y levante el talón de la pierna.

7. Levante la media y levante el talón de la pierna.

8. Levante la media y levante el talón de la pierna.

9. Levante la media y levante el talón de la pierna.

10. Levante la media y levante el talón de la pierna.

11. Levante la media y levante el talón de la pierna.

12. Levante la media y levante el talón de la pierna.

13. Levante la media y levante el talón de la pierna.

14. Levante la media y levante el talón de la pierna.

15. Levante la media y levante el talón de la pierna.

16. Levante la media y levante el talón de la pierna.

17. Levante la media y levante el talón de la pierna.

18. Levante la media y levante el talón de la pierna.

19. Levante la media y levante el talón de la pierna.

20. Levante la media y levante el talón de la pierna.

21. Levante la media y levante el talón de la pierna.

22. Levante la media y levante el talón de la pierna.

23. Levante la media y levante el talón de la pierna.

24. Levante la media y levante el talón de la pierna.

25. Levante la media y levante el talón de la pierna.

26. Levante la media y levante el talón de la pierna.

27. Levante la media y levante el talón de la pierna.

28. Levante la media y levante el talón de la pierna.

29. Levante la media y levante el talón de la pierna.

30. Levante la media y levante el talón de la pierna.

31. Levante la media y levante el talón de la pierna.

32. Levante la media y levante el talón de la pierna.

33. Levante la media y levante el talón de la pierna.

34. Levante la media y levante el talón de la pierna.

35. Levante la media y levante el talón de la pierna.

36. Levante la media y levante el talón de la pierna.

37. Levante la media y levante el talón de la pierna.

38. Levante la media y levante el talón de la pierna.

39. Levante la media y levante el talón de la pierna.

40. Levante la media y levante el talón de la pierna.

41. Levante la media y levante el talón de la pierna.

42. Levante la media y levante el talón de la pierna.

43. Levante la media y levante el talón de la pierna.

44. Levante la media y levante el talón de la pierna.

45. Levante la media y levante el talón de la pierna.

46. Levante la media y levante el talón de la pierna.

47. Levante la media y levante el talón de la pierna.

48. Levante la media y levante el talón de la pierna.

49. Levante la media y levante el talón de la pierna.

50. Levante la media y levante el talón de la pierna.

51. Levante la media y levante el talón de la pierna.

52. Levante la media y levante el talón de la pierna.

53. Levante la media y levante el talón de la pierna.

54. Levante la media y levante el talón de la pierna.

55. Levante la media y levante el talón de la pierna.

56. Levante la media y levante el talón de la pierna.

57. Levante la media y levante el talón de la pierna.

58. Levante la media y levante el talón de la pierna.

59. Levante la media y levante el talón de la pierna.

60. Levante la media y levante el talón de la pierna.

61. Levante la media y levante el talón de la pierna.

62. Levante la media y levante el talón de la pierna.

63. Levante la media y levante el talón de la pierna.

64. Levante la media y levante el talón de la pierna.

65. Levante la media y levante el talón de la pierna.

66. Levante la media y levante el talón de la pierna.

67. Levante la media y levante el talón de la pierna.

68. Levante la media y levante el talón de la pierna.

69. Levante la media y levante el talón de la pierna.

70. Levante la media y levante el talón de la pierna.

71. Levante la media y levante el talón de la pierna.

72. Levante la media y levante el talón de la pierna.

73. Levante la media y levante el talón de la pierna.

74. Levante la media y levante el talón de la pierna.

75. Levante la media y levante el talón de la pierna.

76. Levante la media y levante el talón de la pierna.

77. Levante la media y levante el talón de la pierna.

78. Levante la media y levante el talón de la pierna.

79. Levante la media y levante el talón de la pierna.

80. Levante la media y levante el talón de la pierna.

81. Levante la media y levante el talón de la pierna.

82. Levante la media y levante el talón de la pierna.

83. Levante la media y levante el talón de la pierna.

84. Levante la media y levante el talón de la pierna.

85. Levante la media y levante el talón de la pierna.

86. Levante la media y levante el talón de la pierna.

87. Levante la media y levante el talón de la pierna.

88. Levante la media y levante el talón de la pierna.

89. Levante la media y levante el talón de la pierna.

90. Levante la media y levante el talón de la pierna.

91. Levante la media y levante el talón de la pierna.

92. Levante la media y levante el talón de la pierna.

93. Levante la media y levante el talón de la pierna.

94. Levante la media y levante el talón de la pierna.

95. Levante la media y levante el talón de la pierna.

96. Levante la media y levante el talón de la pierna.

97. Levante la media y levante el talón de la pierna.

98. Levante la media y levante el talón de la pierna.

99. Levante la media y levante el talón de la pierna.

100. Levante la media y levante el talón de la pierna.



**Medi Varic**  
MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

MEDIANA COMPRESIÓN  
15 - 20 mm Hg


CONTROL  
VÁRICE

### INDICACIONES

- Terapéutica
- Venas reticulares
- Varices primarias
- Dolor
- Pesadez
- Post escleróticas

### INDICACIONES

- Therapy
- Reticular veins
- Primary varices
- Pain
- Heaviness
- Post sclerotic

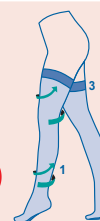

1. Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso  
Decreasing graduated compression that favors venous return
  2. Pie con plantilla que permite la transpiración  
Foot with template that allows perspiration
  3. Diseño en talón para mejor comodidad  
Heel design for better comfort
  4. Banda siliconada para ajuste perfecto  
Silicon band for perfect fit
- Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres  
Recommended by doctors to control fatigue, heaviness and cramps
- COMPOSICIÓN: Poliamida 80%, Elastano 20%  
COMPOSITION: Polyamide 80%, Elastane 20%

### TABLA DE MEDIDAS / MEASURES CHART

(B) MEDIDA DE CIRCUNFERENCIA DE PANTORRILLA

| LARGO / LONG | 11"    | 12"    | 13"    | 14"    | 15"    | 16"    | 17"    | 18" |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 28 cms       | 30 cms | 33 cms | 35 cms | 38 cms | 40 cms | 43 cms | 45 cms |     |
| 14" (35 cms) | S      | S      | S      | S      | M      | M      | L      | L   |
| 15" (38 cms) | S      | S      | S      | M      | M      | L      | L      | L   |
| 16" (40 cms) | S      | S      | M      | M      | M      | L      | L      | L   |
| 17" (43 cms) | S      | M      | M      | M      | M      | L      | L      | XL  |
| 18" (45 cms) | M      | M      | M      | M      | L      | L      | XL     | XL  |
| 19" (48 cms) | M      | M      | M      | M      | L      | XL     | XL     | XL  |

(A) Esta medida se toma estando el pie descalzo desde el suelo hasta el primer pliegue de la rodilla en la parte posterior de la pierna  
(B) Esta medida se toma sobre la porción más gruesa del gemelo

Hecho por / Made by: Medi Varic Products SAS  
www.medivaric.com.co - contacto@medivaric.com.co

Línea nacional de atención:  
+ 57 1 430 30 30  
Bogotá D.C., Colombia

R.S. INVIMA  
2011DM-0007944



ALMA PARA MEDIA DE CADERA  
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

| PESO CAJA IND. |      |    |
|----------------|------|----|
| S              | 0,10 | gr |
| M              | 0,10 | gr |
| L              | 0,12 | gr |
| XL             | 0,12 | gr |

| MEDIDA CAJA IND. |             |      |
|------------------|-------------|------|
| A                | Altura 1    | 19,5 |
| B                | Altura 2    | 19   |
| C                | Ancho       | 11,5 |
| D                | Profundidad | 2,8  |
| E                | Lomo        | 2,8  |

## STICKER





# FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003  
Fecha Creación: Septiembre 26 de 2019  
Versión: 01  
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Opaca Muslo Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 5222

## MATERIAL EMPAQUE

### CAJA SIX PACK GRANDE

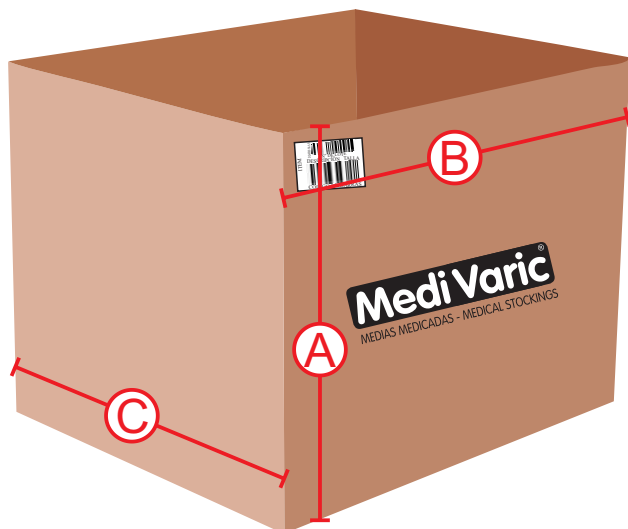


#### MEDIDA CAJA SIX PACK

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| A | Altura      | 19,5 |
| B | Ancho       | 20   |
| C | Profundidad | 11,5 |

#### PESO CAJA SIX PACK

|                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| S                   | 0,68 | gr |
| M                   | 0,70 | gr |
| L                   | 0,72 | gr |
| XL                  | 0,74 | gr |
| CANTIDAD 6 Unidades |      |    |

### CAJA MASTER

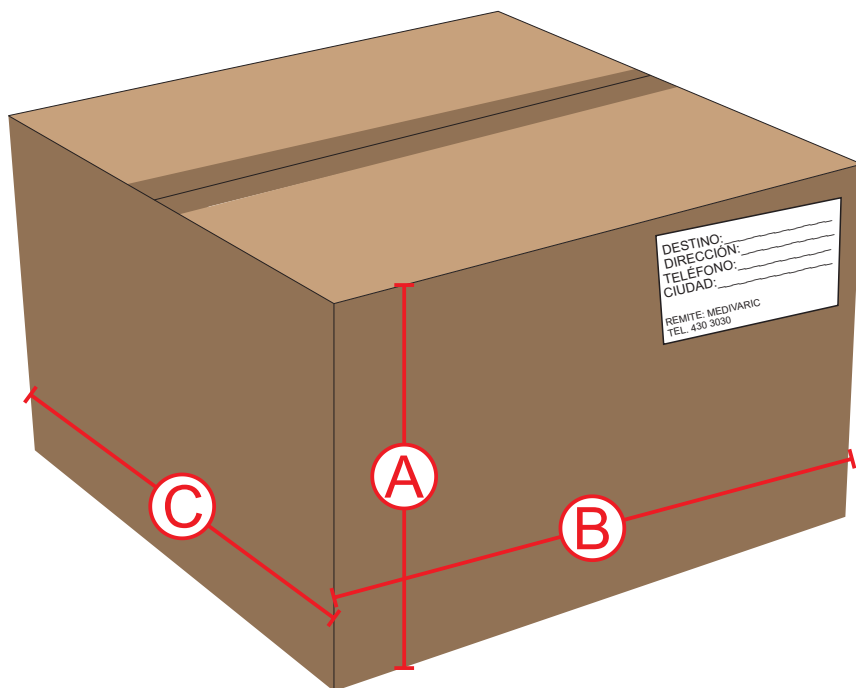

#### MEDIDA CAJA MASTER

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| A | Altura      | 42 |
| B | Ancho       | 55 |
| C | Profundidad | 40 |

#### PESO CAJA MASTER

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| S                     | 13,34 | gr |
| M                     | 13,70 | gr |
| L                     | 14,06 | gr |
| XL                    | 14,10 | gr |
| CANTIDAD 108 Unidades |       |    |