



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Mayo 15 de 2021
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera

Ref: 532G

FOTOGRAFIA



DETALLES

Mediana compresión 15-20 mmHg.

INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Talón anatómico con refuerzo para proteger el calzado.
- Banda elástica para ajuste perfecto.
- Cremallera lateral que facilita su postura.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
 - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 80% Poliamida, 20% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro, Azul, Gris y Beige.
Tallas: S, M, L y XL



Nombre: Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera

Ref: 532G

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS

Item	Nombre	Codigo EAN-13
532Gp0104	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla S Negro	7707670409722
532Gp0105	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla S Azul	7707670407179
532Gp0108	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla S Beige	7707670409852
532Gp0112	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla S Gris	7707670402327
532Gp0204	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla M Negro	7707670403720
532Gp0205	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla M Azul	7707670405885
532Gp0208	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla M Beige	7707670403584
532Gp0212	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla M Gris	7707670408763
532Gp0304	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla L Negro	7707670401306
532Gp0305	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla L Azul	7707670406462
532Gp0308	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla L Beige	7707670403294
532Gp0312	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla L Gris	7707670407254
532Gp0404	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla XL Negro	7707670403270
532Gp0405	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla XL Azul	7707670407612
532Gp0408	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla XL Beige	7707670402679
532Gp0412	Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera talla XL Gris	7707670404345



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Mayo 15 de 2021
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera

Ref: 532G

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN
Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuestese y eleve las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Productos SAS
www.medivarc.com.co
Línea Nacional de Atención al Cliente: 01 4 30 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 2011DM-0007944



CONTAMINACIONES / CONTAMINATIONS
Evitar el uso de cremas, aceites, jabones, etc. en la zona de aplicación de la media.
Avoid the use of creams, oils, soaps, etc. in the area of application of the sock.
Si el problema persiste consultar a su médico. If the problem persists consult your physician.

INDICACIONES DE USO Y CUIDADO
en el interior de la caja
Symptoms, uses and care
indications inside the box.

1. Retire el calzado para poder aplicar la media.
Remove shoes/socks.
2. Retire el calzado para poder aplicar la media.
Remove shoes/socks.
3. Retire el calzado para poder aplicar la media.
Remove shoes/socks.
4. Retire el calzado para poder aplicar la media.
Remove shoes/socks.
5. Verifique que puntera, talón, y planta y elasticidad queden en su lugar.
Check toe, heel and sole and elasticity stay in place.

6. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
7. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
8. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
9. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
10. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.

Como colocar / How to put on:
1. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
2. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
3. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
4. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.
5. Coloque la media sobre el talón y elástico debajo de la rodilla.
Slide the sock over the heel and elastic below the knee.



Recomendado para ayudar a controlar el cansancio, pesadez, calambres, post-escleroterapia, parestesias, venas reticulares, várices primarias y del embarazo
Recommended to aid in controlling tiredness, heaviness, cramps, post-sclerotherapy, paresthesia, reticular veins, primary varicose veins and pregnancy varicose veins.

1. Banda elástica para ajuste perfecto.
Elastic band for perfect fit.
2. Crema lateral para facilitar su postura.
Side cream for easy posture.
3. Compresión graduada decreciente que favorece la circulación.
Gradual decreasing compression that promotes circulation.
4. Talón anatómico con refuerzo para proteger del calzado.
Anatomical heel to protect from shoe friction.

Recomendado por médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.
Recommended by doctors to relieve tiredness, heaviness and cramps.

COMPOSICIÓN / CONTENT: Poliamida - 80% Elastano 20%

TABLA DE TALLAS
(B) MEDIDA CIRCUNFERENCIA EN LA PANTORILLA

B) MEDIDA CIRCUNFERENCIA EN LA PANTORRELLA												
Longitud	14" (36cm)	15" (38cm)	16" (40cm)	17" (43cm)	18" (45cm)	19" (48cm)	20" (51cm)	21" (53cm)	22" (56cm)	23" (58cm)	24" (61cm)	25" (64cm)
14"(36cm)	S	S	S	S	M	M	L	L	L	L	L	L
15"(38cm)	S	S	S	M	M	L	L	L	L	L	L	L
16"(40cm)	S	S	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L
17"(43cm)	S	M	M	M	M	L	L	L	L	L	XL	XL
18"(45cm)	M	M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL
19"(48cm)	M	M	M	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL



FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Mayo 15 de 2021
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera

Ref: 532G

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK PEQUEÑA

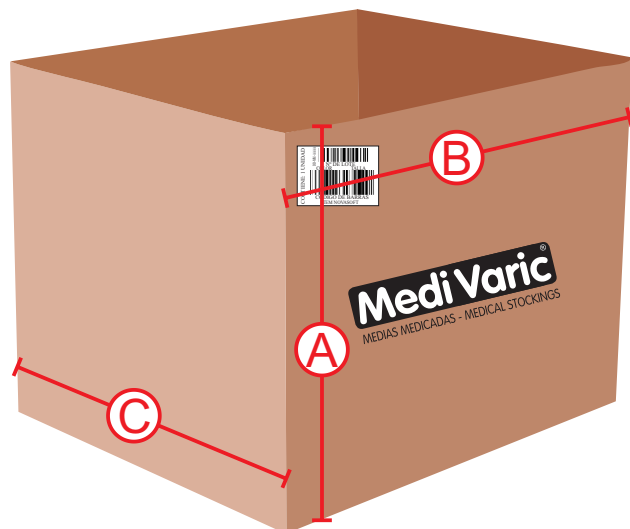

MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	18 cm
B	Ancho	16 cm
C	Profundidad	10 cm

PESO APROX. EMPAQUE SIX PACK

S	0,601	Kg
M	0,637	Kg
L	0,664	Kg
XL	0,691	Kg

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER

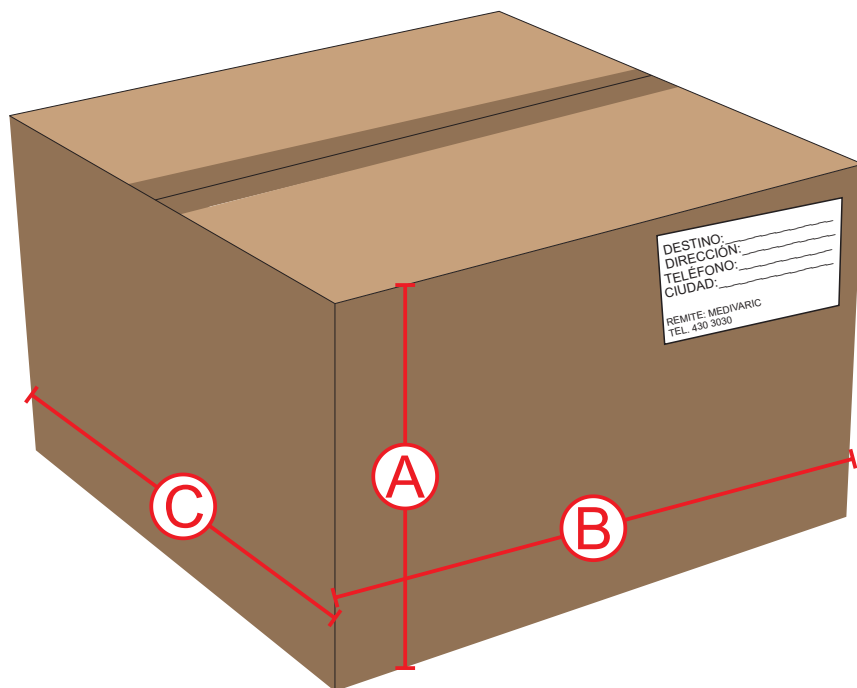

MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42 cm
B	Ancho	55 cm
C	Profundidad	40 cm

PESO APROX. EMPAQUE CAJA MASTER

S	14,42	Kg
M	15,29	Kg
L	15,94	Kg
XL	16,59	Kg

CANTIDAD 144 UNIDADES



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Mayo 15 de 2021
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Unisex Mediana Compresion Con Cierre y Puntera

Ref: 532G

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Criterio de cambio	Página	Responsable	Fecha

Elaborado por:
Stephanie Quiroga.
Diseñadora de Modas

Revisado por:
Olga L. Hormaza.
Auxiliar de Calidad

Aprobado por:
Nubia Cardozo Q.
Dirección de Calidad