# Pharmafix ®

# FICHA TÉCNICA




Nombre genérico:
Cinta Poliéster Stress

Nombre comercial:
Cinta Pharmafix

| Referencia | Dimensión total | | Presentación | |
|---|---|---|---|---|
| | cm | mts | Rollos/ | Cajas/ |
| | Ancho | Long | Caja | Caja |
| FIX5050 | 5 cm X | 5 mt | 1 | 72 |
| FIX5010 | 5 cm X | 10mt | 1 | 72 |
| FIX1050 | 10 cm X | 5 mt | 1 | 36 |
| FIX1010 | 10 cm X | 10 mt | 1 | 36 |
| FIX1510 | 15 cm X | 10 mt | 1 | 36 |

## Materiales

- Área adhesiva recubierta en papel siliconado
- Cinta médica de tela en poliéster no tejida
- Adhesivo acrílico hipoalergénico
- Flexible (stress) hacia lo ancho
- Tubo central en plástico
- Estática a lo largo
- Transpirable

## Uso e indicación

- Sujeción de vendajes de gran superficie o gasas postquirúrgicas
- Ideal para piel sensible
- Como apósito general en cualquier parte del cuerpo
- Fijación de catéteres y tubos de drenaje
- Permite recubrir articulaciones sin restringir el movimiento

## Advertencia

- No usar si conoce alergias a sus componentes.
- En caso de irritación consulte a un profesional de la salud
- Después de la fecha de vencimiento pierde su efecto adhesivo

**Fabricado por:** Pharmaplast : Amria • Alejandría • Egipto
**Importador y Acondicionador:** Ortotex S.A.S : Medellín • Antioquía • Colombia

**Invima:** 202ODM-0021453 **Vence:** 19/03/2030

## Instrucciones de Uso

Aplicar por el cuidador con las manos limpias y secas y sobre la piel limpia y seca

**Datos técnicos:**

- **Tipo de Dispositivo:** No invasivo
- **Riesgo:** (I)
- **Vida útil:** Cinco (5) años
- **Bodegaje:** Temp: ≤ 40 °C / Humedad: ≤ 75 ° F
  (Espacio limpio y alejado de calor y humedad excesiva)
- **Producto No estéril.**
  Para esterilizar utilice método con óxido de etileno (ETO) o radiación

## *Pasos para aplicarlo*

Separe las aletas demarcadas en zig zag




Separe un ala en su totalidad



Posicione en el área a tratar



Procesa a desprender el ala que aún conserva, luego presiones con suavidad los bordes de la cinta para obtener la fijación a la piel

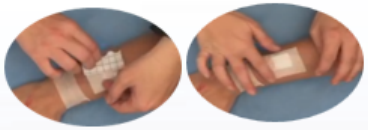

Pharmafix una fijación segura de apósitos primarios





ORTOTEX