

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo

Ref: O740p

FOTOGRAFÍA**NOMBRE COMERCIAL (CÓDIGO CLIENTE)**

Estabilizador abierto de tobillo

POSICIÓN ARANCELARIA

9021.10.10.00

FABRICANTE

Medi Varic Products S.A.S.

DETALLES

- Fabricado en airpreno afelpado de 2 mm fusionado con cobre y neopreno grabado de 2.5 mm, multidireccional sin látex que da soporte, compresión y acción térmica.
- Varillas en espiral bilaterales.
- Bandas afelpadas de sujeción que brindan estabilidad al tobillo.
- Velcros de adherencia fuerte y resistente.
- Acabados sin costuras, que permite que sea más suave, evitando molestias y marcaciones que maltraten la piel.

USO Y BENEFICIO

- Traumas en tejido blandos (tendinitis y esguince grado 2).
- Diseño anatómico, ambidiestro y envolvente.
- Soporte laterales con varillas en espiral bilaterales y bandas de sujeción, que brindan estabilidad al tobillo.
- Forro interno en hilado de cobre que ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona de la lesión.
- Mejorar la apariencia y cicatrización de la piel.
- Cuando las partículas de cobre entran en contacto con el sudor (bacterias y hongos), rompen su estructura y desaparece el mal olor.

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo

Ref: O740p

RECOMENDACIONES DE USO

- Traumas en tejido blandos (tendinitis y esguince grado 2).

CONTRAINDICACIONES

- En caso de presentar reacción alérgica al material o irritación en la piel suspender el uso.
- Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

ADVERTENCIA

- Se recomienda usar por un único paciente y solo para los fines indicados.
- Usar bajo recomendación profesional.
- El producto puede presentar cambio de color en las zonas donde tiene mayor contacto con el pH de nuestro cuerpo.

COMPOSICIÓN

Principal: 50% caucho SBR neopreno / SBR rubber neoprene, 42% poliamida / polyamide, 8% elastano / elastane.
Forro interno: 48% poliamida con cobre / copper enhanced polyamide, 46% poliamida texturizada / textured polyamide, 6% elastano / elastane.

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro.

Tallas: Única.

CRITERIOS DE CALIDAD

- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones, acordonamientos ni rodadas.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Lavar a mano temperatura máxima 40 °C.
- No usar blanqueador.
- No secar en máquina.
- Secado extendido a la sombra.
- No planchar.
- No usar suavizante.
- Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, suavizantes, pomadas o líquidos disolventes.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO DE LA PRENDA

- Mantener alejado de objetos corto punzantes para evitar el deterioro del dispositivo médico.
- Es necesario dejar presente, que para garantizar la duración y eficiencia de este producto; al momento del lavado se deben eliminar todos los residuos de jabón, ya que de no hacerlo se podrían presentar afectaciones en la piel.

GUÍA DE TALLAS

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo

Ref: O740p

MARQUILLA

Medi Varic
COPPER SUPPORT

REF: O740p

Composición:
 50% caucho SBR neopreno /
 SBR rubber neoprene
 42% poliamida / polyamide
 8% elastano / elastane


Forro interno:
 48% poliamida con cobre /
 copper enhanced polyamide
 46% poliamida texturizada /
 textured polyamide
 6% elastano / elastane

HECHO EN COLOMBIA
 MADE IN COLOMBIA

FABRICANTE:
 Medi Varic Products S.A.S
 Carrera 88A No. 64D-58
 Bogotá - Colombia
 NIT 900.403.422-1
 Registro INVIMA
 2022DM-0026318
 Código SIC No. 900403422

S/M

Instrucciones de cuidado y
 conservación del producto
 Care and conservation
 instructions for the product

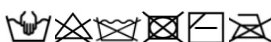

No usar suavizante
 Do not use softener

LOTE MVS0000000

STICKER CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGOS EAN-13


Artículo	Descripción	Código EAN-13
O740p0004	Estabilizador abierto de tobillo talla única color negro	7707670407216

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo


Ref: O740p

MATERIAL EMPAQUE

BOLSA CON GANCHO CONTRAMARCADO

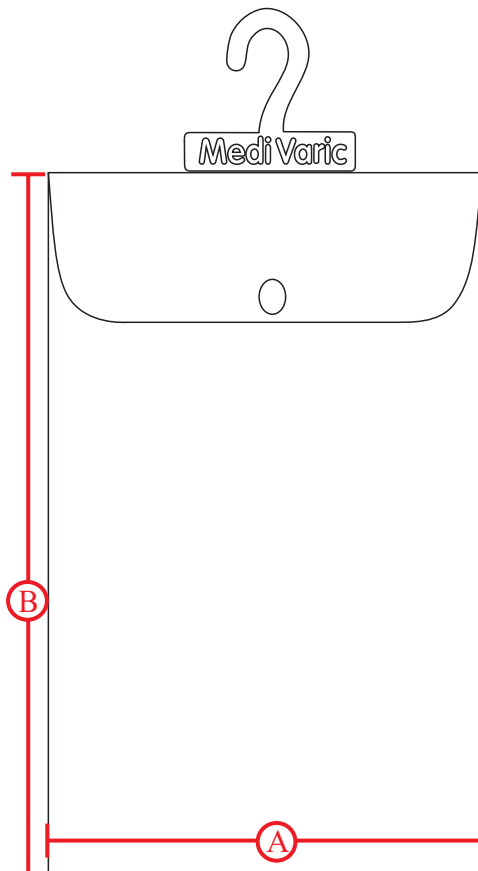

SOLAPA

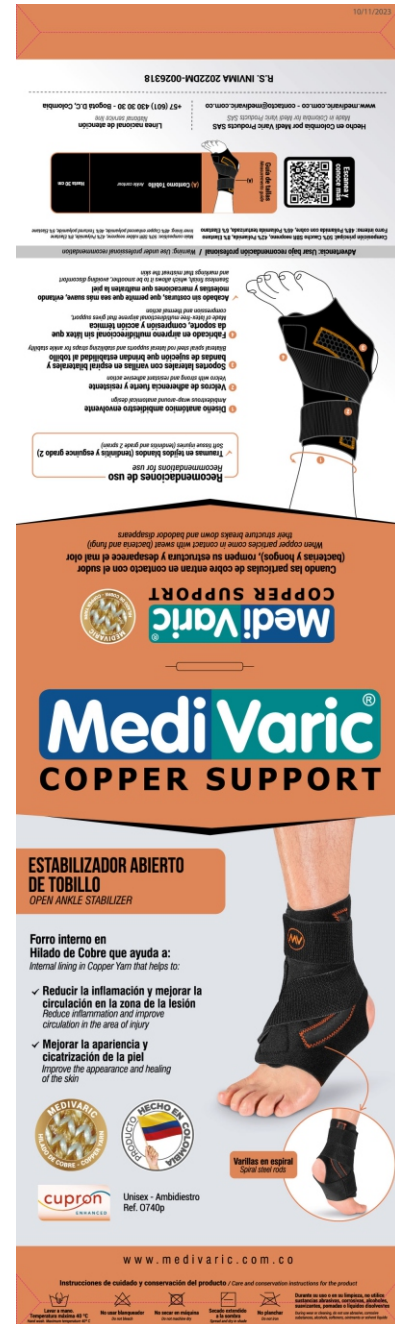

CARTILLA MODO DE USO



Peso aproximado producto individual

ÚNICA	0.167	Kg
-------	-------	----

Medidas empaque producto individual

A	Ancho	17 cm
B	Largo	22.5 cm

Empaque primario: Bolsa polipropileno calibre 6 con gancho contramarcado 17 cm X 22.5 cm.

Empaque interno: Solapa.

Inserto: Cartilla modo de uso.

Empaque secundario: No aplica.

Registro INVIMA: 2022DM-0026318

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo

Ref: O740p

EMPAQUE

Ubicación sticker de importador
 (aplica para los pedidos de exportaciones con especificaciones)




Ubicación sticker código de barras
 lado derecho

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo

Ref: O740p

MATERIAL DE EMPAQUE MASTER

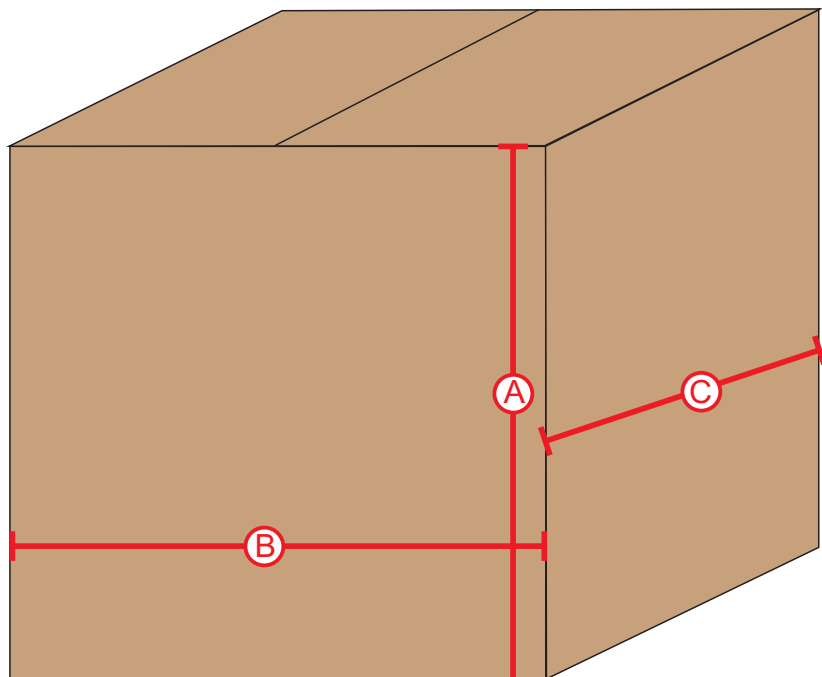

Medida caja master

A	Altura	42 cm
B	Ancho	55 cm
C	Profundidad	40 cm

Peso aproximado empaque caja master

ÚNICA	18.37	Kg
Cantidad 110 unidades		

Nombre: Estabilizador abierto de tobillo

Ref: O740p

HISTORIAL DE CAMBIOS FICHA TÉCNICA

Versión	Descripción de la modificación	Página	Fecha última versión
01	• Creación de ficha técnica.	Pág. 1	15/12/2023

Elaboro

Nombre: Stepfanie Quiroga Murcia
 Firma:

Reviso

Nombre: Jhensi Aguilera Cardone
 Firma:

Aprobo

Nombre: Nubia Cardozo Quimbayo
 Firma:

Cargo: Técnico en diseño
 Fecha: 29/09/2024

Cargo: Diseñadora
 Fecha: 15/12/2023

Cargo: Directora de calidad y desarrollo
 Fecha: 01/03/2024